


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Ultrazvukový vodní  
peeling účinně  
odstraňuje kožní maz,  
staré buňky a hloubkově  
čistí zanesené póry.  
Frekvence 28–30 kHz  
zaručuje maximální  
čisticí účinek  
a zároveň i šetrnost  
vůči pokožce.



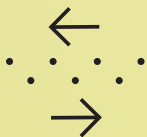

# Čisticí rituál


**Výsledek:** čistá pleť zbavená starých buněk a nečistot, připravená absorbovat účinné látky Vaší oblíbené kosmetiky.

**Potřebujete:** klidné místo se zrcadlem, odlíčenou pleť, Rituální peeler Reclar, 5 minut času.

**Postup:** Zapněte funkci Peeling a přejíždějte peelerem od spánků spodem k nosu a vrchem do středu čela, dále od úst k uším a od špičky nosu směrem vzhůru. Obličej průběžně navlhčujte např. mokrým tamponkem.

Čisticí rituál doporučujeme 1–2x týdně podle typu pleti.

# Léčivý rituál

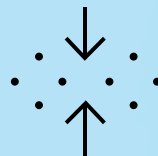

**Výsledek:** zahojená a zklidněná pleť, odstranění jizviček a skvrn, jako bonus zefektivnění účinků kosmetiky.

**Potřebujete:** svůj oblíbený krém, sérum či masku, Rituální peeler Reclar, pár minut času.

**Postup:** Na pleť naneste oblíbený pleťový krém, masku či sérum a zapněte funkci G-Blue. Peeler otočte přední stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje do stran. Dotýkejte se při tom postranních líst, aby svítilo léčivé modré světlo.

Léčivý rituál doporučujeme provádět pravidelně, stačí jen pár minut denně.





Modré světlo léčí akné  
a sterilizuje tkáň, aby  
nedocházelo k dalšímu  
zánětu. Zároveň pomáhá  
hojit rány a drobné  
jizvičky. Galvanizace  
zvyšuje účinek  
pečující kosmetiky  
a pomáhá udržovat  
pružnost pokožky.


# Omlazující rituál

**Výsledek:** vyhlazená a rozzářená pleť, stažené póry, aktivace tvorby kolagenu.

**Potřebujete:** svůj oblíbený krém, sérum či masku, Rituální peeler Reclar, pár minut času.


**Postup:** Naneste oblíbený pleťový krém, masku či sérum a zapněte funkci G-Red. Peeler otočte přední stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje do stran. Během terapie držte peeler po stranách, aby svítilo omlazující červené světlo.

Omlazující rituál doporučujeme provádět pravidelně, stačí jen pár minut denně.

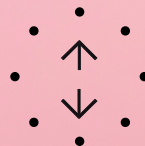

Červené světlo aktivuje kolagen, redukuje vrásky a pigmentové skvrny, stahuje póry. Galvanizace zvyšuje účinek pečující kosmetiky a pomáhá udržovat pružnost pokožky.



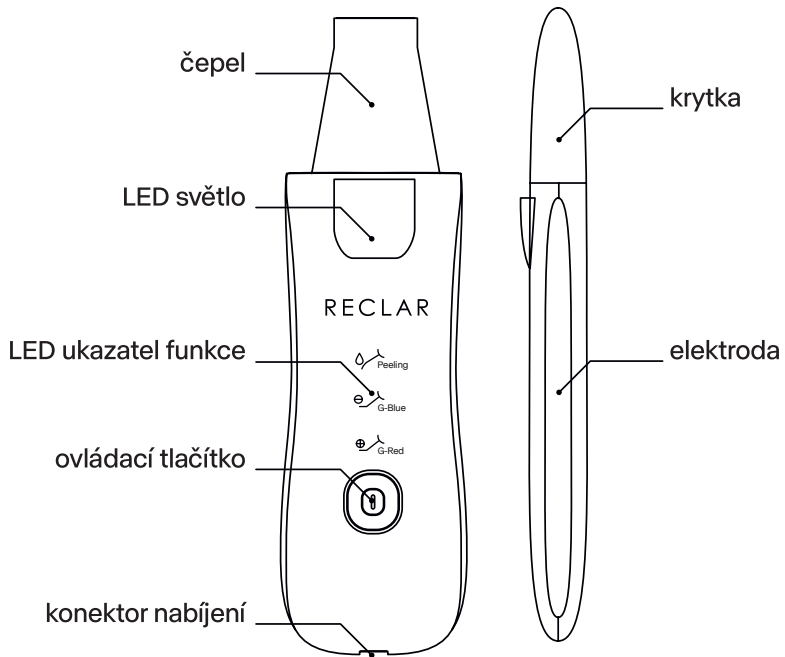




# Rychlý start

## 1) Přístroj plně nabijte pomocí přiloženého kabelu.

Nevyvíjejte nadměrnou sílu při zasouvání kabelu do přístroje. Nabíjení indikuje červené světlo. Plné nabití signalizuje modré světlo.

## 2) Sundejte krytku čepele.

Vyklopte krytku čepele směrem k sobě dle obrázku.

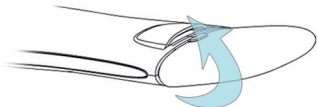



## 3) Zapněte přístroj dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka.



## 4) Zvolte požadovanou funkci:

 Peeling – stiskněte 1x krátce ovládací tlačítko

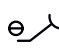 G-Blue – stiskněte 2x krátce ovládací tlačítko

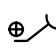 G-Red – stiskněte 3x krátce ovládací tlačítko

Pozn.: Pro aktivaci světelné terapie je nutné se během aplikace dotýkat elektrod – postranních metalických lišt.

Pokud aplikujete G-Blue nebo G-Red na druhé osobě, je nutné navíc uzavřít okruh dotekem této osoby.

## 5) Přístroj vypněte dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka.


Po každém použití jemně očistěte čepel pomocí bavlněného hadříku, případně dezinfikujte.

## FUNKCE PEELING


# Ultrazvukové čištění pleti

Lze provádět 1–2x týdně podle typu pleti. Délka čištění pleti je nastavena na max. 5 minut, poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme nepřekračovat tuto dobu při jednom použití.

**Krok 1:** Odličte si a omyjte pleť. Ta by měla zůstat během peelingu mírně vlhká, proto doporučujeme připravit si např. vatový tamponěk namočený ve vodě, kterým můžete pleť pravidelně navlhčovat.

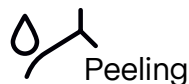

**Krok 2:** Příklad zapnete dlouhým stisknutím tlačítka. Pro aktivaci funkce Peeling stiskněte 1x krátce tlačítko do polohy, kdy se rozsvítí kontrolka požadované funkce. Pokud máte přístroj v pohotovostním režimu, stačí 1x krátce stisknout.

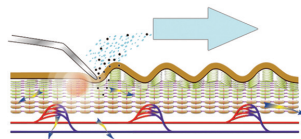

**Krok 3:** Peeler nechte otočený zadní stranou k sobě, čepel lehce přiložte na navlhčenou pokožku. Přejíždějte peelerem od spánků spodem k nosu a vrchem do středu čela, dále od uší k ústům a od špičky nosu směrem vzhůru. Obličej průběžně navlhčujte.



Peeling může pleť vysušit, proto doporučujeme po čištění nanést Vaši oblíbenou hydratační kosmetiku.

FUNKCE G-BLUE



# Galvanizace s terapií modrým světlem

Lze používat denně. Délka jedné terapie je nastavena na max. 5 minut, poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme nepřekračovat tuto dobu.

**Krok 1:** Na vyčištěnou pleť aplikujte svoji oblíbenou pečující kosmetiku (krém, masku či sérum). Pleť musí být vybraným přípravkem dostatečně navlhčená.

**Krok 2:** Přístroj zapněte dlouhým stisknutím tlačítka. Pro aktivaci funkce G-Blue stiskněte 2x po sobě krátce tlačítko do polohy, kdy se rozsvítí kontrolka požadované funkce. Pokud máte přístroj v pohotovostním režimu, stačí 2x krátce stisknout.

**Krok 3:** Peeler otočte přední stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje do stran. Během terapie držte peeler po stranách, aby svítilo léčivé modré světlo.

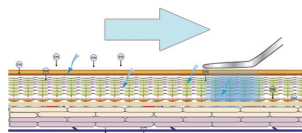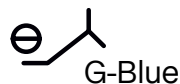

FUNKCE G-RED




# Galvanizace s terapií červeným světlem

Lze používat denně. Délka jedné terapie je nastavena na max. 5 minut, poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme nepřekračovat tuto dobu.

**Krok 1:** Na vyčištěnou pleť aplikujte svoji oblíbenou pečující kosmetiku (krém, masku či sérum). Pleť musí být vybraným přípravkem dostatečně navlhčená.

**Krok 2:** Přístroj zapněte dlouhým stisknutím tlačítka. Pro aktivaci funkce G-Red stisknete 3x po sobě krátce tlačítko do polohy, kdy se rozsvítí kontrolka požadované funkce. Pokud máte přístroj v pohotovostním režimu, stačí 3x krátce stisknout.

**Krok 3:** Peeler otočte přední stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje do stran. Během terapie držte peeler po stranách, aby svítilo omlazující červené světlo.

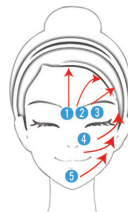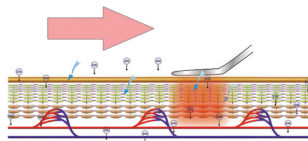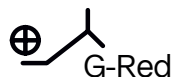

# Časté dotazy

## **Mohu používat peeler ve sprše?**

Výrobek není voděodolný. Při namočení může dojít k jeho poškození.

## **Jak čistit čepel?**

Čištění čepele doporučujeme provádět pomocí Reclar hadříku či jemného bavlněného materiálu.

## **Čím dezinfikovat?**

Pro dezinfekci použijte čistič na bázi alkoholu.

## **Je v pořádku, když se čepel hýbe?**

Čepel má potřebnou vůli, aby mohl peeler správně fungovat při vibracích, proto za ni netahujte silou, pouze ji jemně otřete.

## **Kam dát peeler po použití?**

Peeler skladujte na suchém místě. Nedoporučujeme nechávat ho v koupelně nebo jiné vlhké místnosti.

## **Mohu používat peeler v těhotenství?**

Funkci Peeling ano. Používání funkcí G-Blue a G-Red se během těhotenství nedoporučuje.

## **Je světlo škodlivé pro oči?**

Během používání funkcí G-Blue a G-Red postupujte podle návodu, abyste zabránili přímému svícení LED světlem do očí.

## **Co dělat, když nesvítí světla?**

Aby se uzavřel galvanizační okruh a rozsvítilo se terapeutické světlo, je během používání G-Blue a G-Red nutné držet postranní elektrody (metalické lišty).

## **Mohu použít peeler na druhé osobě?**

Pokud aplikujete funkce G-Blue a G-Red na druhé osobě, je potřeba uzavřít galvanický okruh dotekem této osoby. U funkce Peeling to není nutné.

## **Je nutné používat speciální kosmetiku?**

Peeler Reclar lze použít s jakoukoliv pečující kosmetikou.

## **Mohu jednotlivé funkce používat neomezeně?**

Doporučujeme nepřekračovat přednastavenou dobu používání pro jednotlivé funkce.

## **Jak nabíjet peeler?**

Použijte přiložený kabel s jakýmkoliv USB zdrojem. Nabíjecí kabel vsuňte jemně. Přístroj doporučujeme vždy zcela nabít.

## **Jak poznám, že je peeler vybitý?**

Při slabé baterii se LED ukazatel 5x rozsvítí a přístroj se vypne. Doporučujeme preventivně nabíjet po zhruba 30 minutách používání.

## **Kdy je přístroj plně nabitý?**

Nabíjení je indikováno červeným světlem. Po plném nabití se rozsvítí modrá kontrolka.

## **Mohu používat peeler během nabíjení?**

Během nabíjení není přístroj funkční.

## **Přístroj se nenabíjí, co s tím?**

Pokud se přístroj nenabíjí, nesnažte se silou tlačit nabíjecí kabel do přístroje. Může se jednat o poškození kabelu. V tomto případě použijte jiný kompatibilní nabíjecí kabel.



[reclar.com/instructions](https://reclar.com/instructions)



reclar.com

