


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Le gommage à eau par ultrasons élimine efficacement le sébum ainsi que les cellules mortes, et nettoie les pores en profondeur. Sa fréquence d'utilisation située entre 28 et 30 kHz garantit un effet nettoyant maximum et traite la peau en douceur.



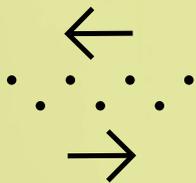

Routine de nettoyage


Résultat: une peau nette sans cellules mortes ni impuretés, prête à absorber les substances actives de vos produits de beauté préférés.

Vous avez besoin: d'un endroit tranquille avec un miroir, d'une peau démaquillée, du Ritual Peeler de Reclar et de cinq petites minutes.

Comment procéder: Activer la fonction Peeling et faire glisser l'appareil des tempes vers le nez et du haut vers le milieu du front, de la bouche aux oreilles et du bout du nez vers le haut. Humidifier continuellement le visage avec un coton humide.

Nous vous recommandons de répéter cette routine de nettoyage 1 à 2 fois par semaine selon le type de la peau.

Routine de soin

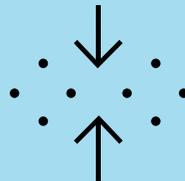

Résultat: une peau cicatrisée et apaisée, une élimination des cicatrices et des taches, et en bonus une plus grande efficacité de vos produits cosmétiques.

Vous avez besoin: de votre crème, sérum ou masque préféré, et de quelques petites minutes.

Comment procéder: Appliquer votre crème, masque ou sérum préféré sur votre peau et activer la fonction G-Blue. Orienter l'appareil face à soi et faire glisser la tête de l'appareil du centre du visage vers les côtés. Ce faisant, appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière bleue de soin s'allume.

Nous vous recommandons de répéter cette routine de soin régulièrement, ce qui ne vous prendra que quelques minutes par jour.





La lumière bleue traite l'acné et stérilise les tissus pour prévenir toute inflammation ultérieure. Elle aide aussi à guérir les plaies et petites cicatrices. La galvanisation renforce l'efficacité des produits cosmétiques et aide à maintenir l'élasticité de la peau.


Routine de rajeunissement

Résultat: une peau lisse et éclatante, des pores resserrés, une production de collagène stimulée..

Vous avez besoin: de votre crème, sérum ou masque préféré, et de quelques petites minutes.


Comment procéder: Appliquer votre crème, masque ou sérum préféré, et activer la fonction G-Red. Orienter l'appareil face à soi et faire glisser la tête de l'appareil du centre du visage vers les côtés. Ce faisant, appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière rouge rajeunissante s'allume.

Nous vous recommandons d'effectuer cette routine de rajeunissement régulièrement, ce qui ne vous prendra que quelques minutes par jour.

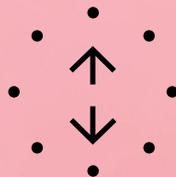

A woman with long dark hair is shown in profile, using a handheld red light therapy device on her cheek. The device has a white handle and a gold-colored rectangular head. A soft red glow emanates from the device's head, illuminating her skin. The background is a solid light pink color.

La lumière rouge stimule la production de collagène, atténue les rides et les taches de la peau, et resserre les pores. La galvanisation renforce l'efficacité des produits cosmétiques et aide à maintenir l'élasticité de la peau.

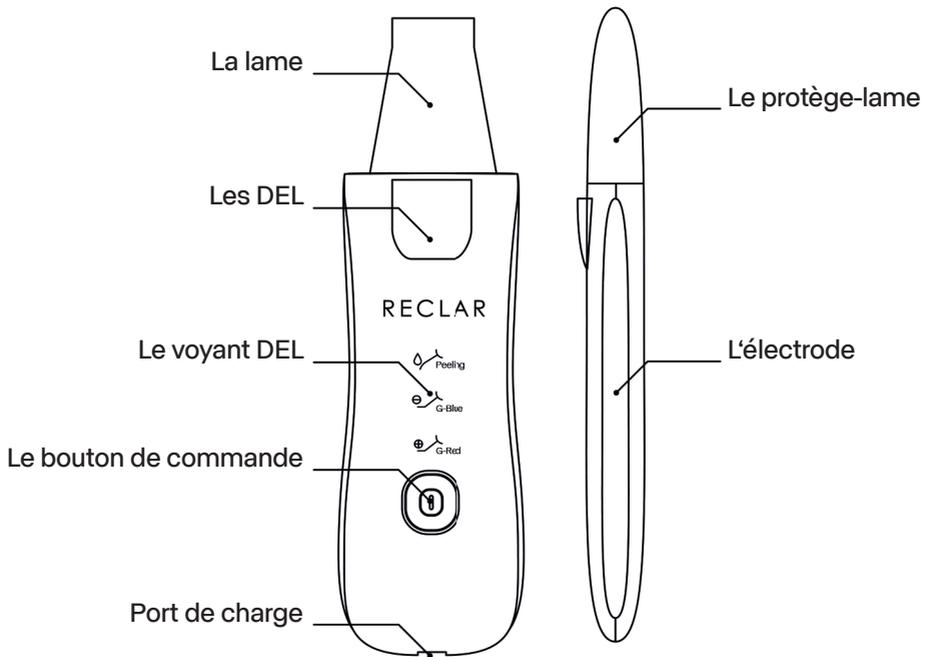


Démarrage rapide

1) Recharger complètement l'appareil avec le câble fourni.

Ne pas appliquer de force excessive lors de l'insertion du câble dans l'appareil. Le chargement est indiqué par un voyant rouge. Le chargement complet est indiqué par un voyant bleu.

2) Retirer le protège-lame.

Pivoter le protège-lame vers vous comme illustré.

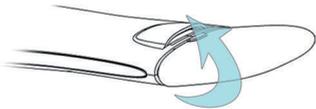

3) Allumer l'appareil en appuyant longuement sur le bouton de commande.



4) Sélectionner la fonction souhaitée:

-  appuyer brièvement une fois sur le bouton de commande
-  G-Blue: appuyer deux fois brièvement sur le bouton de commande
-  G-Red: appuyer brièvement 3 fois sur le bouton de commande.

N. B.: pour activer la fonction de luminothérapie, il est nécessaire d'appuyer sur les électrodes – bandes métalliques latérales – lors de l'application.

Si vous appliquez la fonction G-Blue ou G-Red sur une autre personne, vous devez également fermer le circuit en touchant cette personne.

5) Éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton de commande.

Après chaque utilisation, nettoyer délicatement la lame avec un chiffon en coton ou la désinfecter.

FONCTION PEELING



Nettoyage de la peau par ultrasons

Peut être appliquée une à deux fois par semaine selon le type de peau. La durée du nettoyage de la peau est réglée sur 5 minutes maximum, avant que la fonction ne s'éteigne automatiquement. Nous vous recommandons de ne pas dépasser cette durée pour chaque utilisation.

Étape 1: Démaquiller et rincer la peau. Celle-ci devrait rester légèrement humide pendant le gommage. Nous vous recommandons donc de préparer, par exemple, un coton imbibé d'eau avec lequel vous pourrez régulièrement humidifier la peau.

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour allumer l'appareil. Pour activer la fonction Peeling, appuyer une fois brièvement sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de la fonction désirée s'allume. Si l'appareil est en veille, appuyer simplement une fois brièvement.

Étape 3: Orienter l'appareil face arrière vers soi, poser délicatement la lame sur la peau humidifiée. Faire glisser l'appareil des tempes vers le nez et du haut vers le milieu du front, de la bouche aux oreilles et du bout du nez vers le haut. Maintenir le visage humidifié. Le gommage peut dessécher la peau, nous vous recommandons donc d'appliquer vos produits cosmétiques hydratants préférés après le nettoyage.

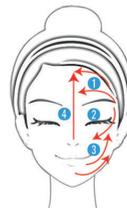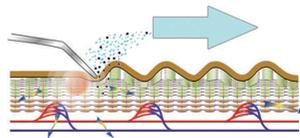

FONCTION G-BLUE




Galvanisation par traitement à la lumière bleue

Peut être utilisée quotidiennement. La durée du traitement est réglée sur 5 minutes maximum, avant que la fonction ne s'éteigne automatiquement. Nous vous recommandons de ne pas dépasser cette durée.

Étape 1: Appliquer votre soin de beauté préféré (crème, masque ou sérum) sur la peau nettoyée. La peau doit être suffisamment hydratée par le produit choisi.

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour allumer l'appareil. Pour activer la fonction G-Blue, appuyer brièvement deux fois de suite sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de la fonction désirée s'allume. Si l'appareil est en veille, appuyer simplement deux fois brièvement.

Étape 3: Orienter l'appareil face à soi et faire glisser la tête de l'appareil du centre du visage vers les côtés. Au cours du traitement, appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière bleue de soin s'allume.

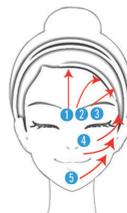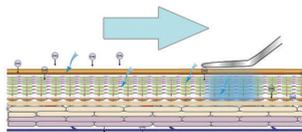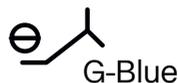

FONCTION G-RED



Galvanisation par traitement à la lumière rouge

Peut être utilisée quotidiennement. La durée du traitement est réglée sur 5 minutes maximum, avant que la fonction ne s'éteigne automatiquement. Nous vous recommandons de ne pas dépasser cette durée.

Étape 1: Appliquer votre soin de beauté préféré (crème, masque ou sérum) sur la peau nettoyée. La peau doit être suffisamment hydratée par le produit choisi.

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour allumer l'appareil. Pour activer la fonction G-Red, appuyer brièvement trois fois de suite sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de la fonction désirée s'allume. Si l'appareil est en veille, appuyer simplement trois fois brièvement.

Étape 3: Orienter l'appareil face à soi et faire glisser la tête de l'appareil du centre du visage vers les côtés. Ce faisant, appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière rouge rajeunissante s'allume.

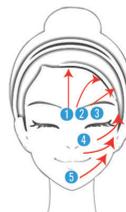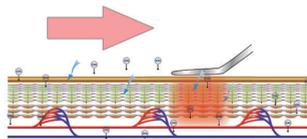

Questions fréquentes

Est-ce que je peux utiliser l'appareil sous la douche?

Le produit n'est pas étanche. Il peut être endommagé lorsqu'il est trempé.

Comment nettoyer la lame?

Nous vous recommandons de nettoyer la lame avec un chiffon Reclar ou avec un tissu en coton fin.

Quel produit utiliser pour la désinfecter?

Utilisez un nettoyant à base d'alcool pour la désinfection.

Est-ce normal que la lame bouge?

La lame a le jeu nécessaire pour que l'appareil fonctionne correctement lors des vibrations, donc ne forcez pas dessus mais essayez-la doucement.

Où faut-il ranger l'appareil après utilisation?

Gardez l'appareil dans un endroit sec. Nous vous recommandons de ne pas le laisser dans la salle de bains ou dans toute autre pièce humide.

Puis-je utiliser l'appareil pendant la grossesse?

Vous pouvez utiliser la fonction Peeling. L'utilisation des fonctions G-Blue et G-Red n'est pas recommandée lors de la grossesse.

La lumière est-elle nocive pour les yeux?

Lors de l'utilisation des fonctions G-Blue et G-Red, veuillez suivre les instructions pour éviter que les DEL ne soient dirigées directement vers les yeux.

Que faire si les lumières ne s'allument pas?

Afin de fermer le circuit de galvanisation et d'allumer la lumière de soin, il est nécessaire d'appuyer sur les électrodes latérales (bandes métalliques) lors de l'utilisation du G-Blue ou du G-Red.

Puis-je appliquer l'appareil sur une autre personne?

Si vous appliquez les fonctions G-Blue et G-Red sur une autre personne, vous devez fermer le circuit galvanique en touchant cette personne. Ceci n'est pas nécessaire avec la fonction Peeling.

Dois-je utiliser des produits cosmétiques spéciaux?

L'appareil peut être utilisé avec n'importe quel produit cosmétique.

Puis-je utiliser chaque fonction indéfiniment?

Nous vous recommandons de ne pas dépasser la durée d'utilisation prédéfinie pour chaque fonction.

Comment recharger l'appareil?

Utilisez le câble fourni avec n'importe quelle source USB. Insérez doucement le câble de chargement. Nous vous recommandons de toujours recharger l'appareil complètement.

Comment savoir si l'appareil est déchargé?

Lorsque la batterie est déchargée, le voyant DEL clignote 5 fois et l'appareil s'éteint. Nous vous recommandons d'effectuer une recharge préventive après environ 30 minutes d'utilisation.

Quand l'appareil est-il complètement rechargé?

Le chargement est indiqué par un voyant rouge. Lorsque le chargement est complet, un voyant bleu s'allume.

Puis-je utiliser l'appareil en cours de chargement?

En cours de chargement, l'appareil est hors service.

L'appareil ne se recharge pas, que faire?

Si l'appareil ne se recharge pas, n'essayez pas de forcer le câble de chargement dans l'appareil. Cela vient peut-être du câble qui est endommagé. Dans ce cas, utilisez un autre câble de chargement compatible.



reclar.com/instructions



reclar.com

