


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Az ultrahangos vizes bőrradírozás hatékonyan távolítja el az arcbőrről a faggyút és az elhalt hámsejteket, és mélyen kitisztítja az eltömődött pórusokat. A 28-30 kHz-es frekvencia maximális tisztítóhatást biztosít, és a bőrhöz is kíméletes.



Tisztítórituálé

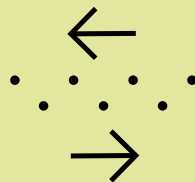


Az eredmény: tiszta, az elhalt hámsejtektől és szennyeződésektől mentes bőr, amely készen áll a kedvelt kozmetikumai hatóanyagainak befogadására.

Amire szüksége van: egy csendes hely egy tükörrel, a sminktől megtisztított arcbőr, Ritual Peeler Reclar arctisztító készülék, 5 percnyi idő.

Eljárás: Kapcsolja be a Peeling (bőrradírozás) funkciót, és mozgassa az arctisztító készüléket a halántéktól lefelé az orr felé, és felfelé a homlok közepéig, majd a szájatól a fülek felé, és az orrhegytől felfelé. Az arcát folyamatosan nedvesítse, pl. egy nedves vattakoronggal.

A tisztítókezelést bőrtípustól függően heti 1-2 alkalommal javasoljuk.

Gyógyítórituálé

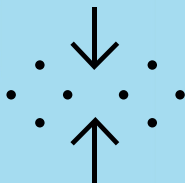

Az eredmény: begyógyult, nyugodt arcbőr, eltávolított hegek és foltok, emellett pedig a kozmetikumok jobb hatása.

Amire szüksége van: a kedvenc kréme, széruma vagy pakolása, Ritual Peeler Reclar készülék, pár percnyi idő.

Eljárás: Vigye fel arcbőrére a kedvenc arckrémét, pakolását vagy szérumát, és kapcsolja be a G-Blue funkciót. Fordítsa a készüléket az első oldalával maga felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei felé. Eközben érjen az oldallapokhoz, hogy a gyógyító kék fény világítani kezdjen.


A gyógyítókezelést ajánlott rendszeresen végezni, ám elegendő, ha naponta csak néhány percig alkalmazza.





A kék fény gyógyítja a pattanásokat és sterilizálja a szöveteket, hogy megakadályozza a további gyulladást. Segít a sebek és az apró hegek gyógyulásában is. A galvanizálás fokozza az ápoló kozmetikumok hatását, és segít megőrizni a bőr rugalmasságát.

Fiatalítórituálé

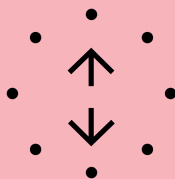

Az eredmény: kisimult és ragyogó arcbőr, összehúzódottn pórusok, a kollagéntermelés aktiválása.


Amire szüksége van: a kedvenc kréme, széruma vagy pakolása, Ritual Peeler Reclar készülék, pár percnyi idő.

Eljárás: Vigye fel arcbőrére a kedvenc arckrémét, pakolását vagy szérumát, és kapcsolja be a G-Red funkciót. Fordítsa a készüléket az első oldalával maga felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei felé. A kezelés során oldaltartsa a készüléket, hogy a fiatalító vörös fény világítson.

A fiatalítórituálét ajánlott rendszeresen végezni, ám elegendő, ha naponta csak néhány percig alkalmazza.

A vörös fény aktiválja a kollagént, csökkenti a ráncokat és a pigmentfoltokat, és összehúzza a pórusokat. A galvanizálás fokozza a bőrápoló kozmetikumok hatását, és segít megőrizni a bőr rugalmasságát.



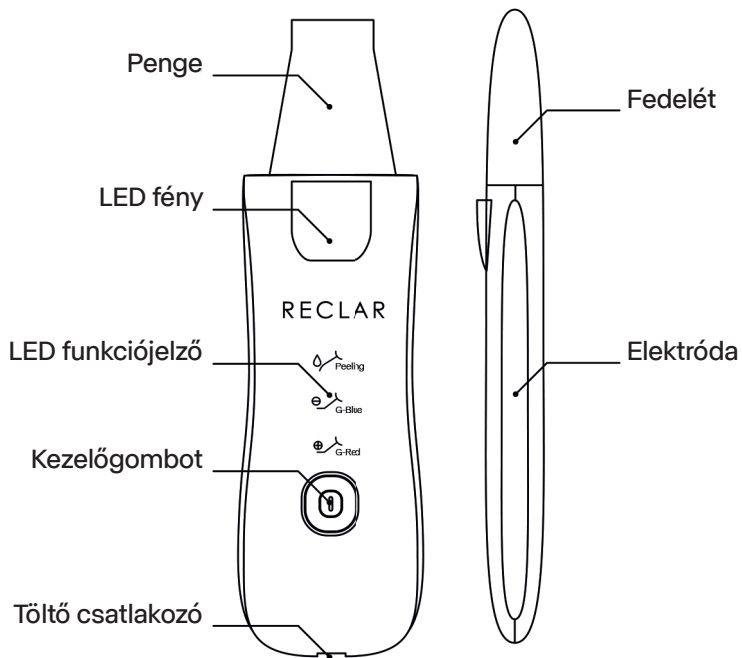

Gyors indítás

1) Töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt kábel segítségével.

A kábelt ne túlzott erővel helyezze be a készülékbe. A töltést piros fény jelzi. A teljes töltöttséget kék fény jelzi.

2) Vegye le a penge fedelét.

Hajtsa ki a penge fedelét a képen látható módon maga felé.



3) Kapcsolja be a készüléket a kezelőgomb lenyomva tartásával.



4) Válassza ki a kívánt funkciót:



Peeling funkció kiválasztásához nyomja meg egyszer röviden a kezelőgombot



A G-Blue funkció kiválasztásához nyomja meg kétszer röviden a kezelőgombot



A G-Red funkció kiválasztásához nyomja meg háromszor röviden a kezelőgombot

Megjegyzés: A fényterápia aktiválásához az alkalmazás során meg kell érinteni az elektródákat – a fém oldallapokat.

Ha a G-Blue vagy a G-Red kezelést egy másik személynél alkalmazza, akkor ezen felül az áramkört az adott személynek is meg kell érintenie az áramkör bezárásához.

5) Kapcsolja ki a készüléket a kezelőgomb lenyomva tartásával.

A pengét minden használat után óvatosan tisztítsa meg egy pamutkendővel vagy fertőtlenítsze azt.

PEELING (BŐRRADÍROZÓ) FUNKCIÓJA




Az ultrahangos arcbőrtisztítás

Bőrtípustól függően hetente 1-2 alkalommal végezhető. A bőrtisztítás időtartama max. 5 perc üzemidőre van beállítva, amely után a funkció automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy ezt az időt egyszeri használat során ne lépje túl.

1. lépés: Távolítsa el a sminket az arcáról, majd mossa meg arcbőrét. A bőrradírozás során a bőrnek kissé nedvesnek kell maradnia, ezért javasoljuk, hogy a kezeléshez készítsen elő egy vízzel átitatott vattakorongot, amellyel rendszeresen benedvesítheti bőrét a kezelés idején.

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelógomb lenyomva tartásával. A Peeling funkció aktiválásához nyomja meg egyszer röviden a gombot, addig, amíg a kívánt funkció ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, csak nyomja meg egyszer röviden a gombot.

3. lépés: Fordítsa maga felé a készülék a hátoldalát, és óvatosan helyezze rá a pengét a nedves bőrre. Mozgassa az arctisztító készüléket a halántéktól felfelé az orr felé, és felfelé a homlok közepéig, majd a szájtól a fülek felé, és az orrhegytől felfelé. Az arcbőrét folyamatosan nedvesítse be. A peeling kiszáríthatja a bőrt, ezért javasoljuk, hogy az arcbőrének megtisztítása után alkalmazza kedvenc hidratáló kozmetikumát.

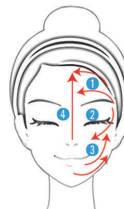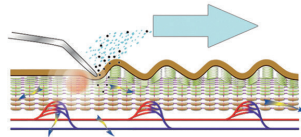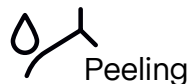

G-BLUE FUNKCIÓ




Galvanizálás, kék fénnyel történő terápiával

A kezelés naponta alkalmazható. Egy kezelés időtartama max. 5 perc üzemidőre van beállítva, amely után a funkció automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy ezt az időt ne lépje túl.

1. lépés: A megtisztított arcbőrre vigye fel kedvenc bőrápoló termékeit (krém, arcpakolás vagy szérum). A bőrnek a kiválasztott termék által kellően nedvesítettnek kell lennie.

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelőgomb lenyomva tartásával. A G-Blue funkció aktiválásához nyomja meg kétszer egymás után röviden a gombot, addig, amíg a kívánt funkció ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, csak nyomja meg kétszer röviden a gombot.

3. lépés: Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei felé. A kezelés során tartsa oldalt a készüléket, hogy a gyógyító kék fény világitson.

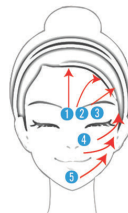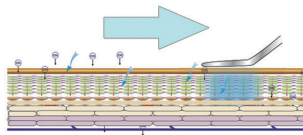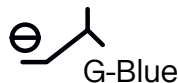


G-RED FUNKCIÓ


Galvanizálás, vörös fénnel történő terápiával

Naponta használható. Egy kezelés időtartama max. 5 perc üzemidőre van beállítva, amely után a funkció automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy ezt az időt ne lépje túl.


1. lépés: A megtisztított arcbőrre vigye fel kedvenc bőrápoló termékeit (krém, arcpakolás vagy szérum). A bőrnek a kiválasztott termék által kellően nedvesítettnek kell lennie.

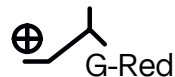

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelógomb lenyomva tartásával. A G-Red funkció aktiválásához nyomja meg háromszor egymás után röviden a gombot, addig, amíg a kívánt funkció ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, csak nyomja meg háromszor röviden a gombot.

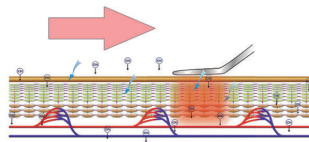

3. lépés: Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei felé. A kezelés során oldaltartsa a készüléket, hogy a fiatalító vörös fény világítson.

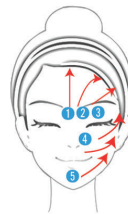

Gyakori kérdések

Használhatom a peeler készüléket a zuhany alatt?

A termék nem vízálló. Vízzel való érintkezés során megsérülhet.

Hogyan tisztítsam a pengét?

Javasoljuk, hogy a pengét Reclar törőken-dővel vagy puha pamutanyaggal tisztítsa meg.

Mivel fertőtlenítssem?

A fertőtlenítéshez használjon alkohol alapú tisztítószert.

Nem baj, ha a penge mozog?

A penge rendelkezik a szükséges holtjátékkal ahhoz, hogy az arctisztító készülék megfelelően működjön rezgés közben, ezért ne húzza erővel, csak óvatosan törölje meg.

Hol tároljam a készüléket a használata után?

A peeler készüléket tárolja száraz helyen. Nem javasolt fürdőszobában vagy más nedves helyiségben tárolni.

Használhatom a peeler készüléket a terhesség ideje alatt?

? A Peeling funkciót terhesség ideje alatt is használhatja. A G-Blue és G-Red funkciók használata terhesség ideje alatt nem javasolt.

Ártalmasak ezek a fények a szemre?

A G-Blue és G-Red funkciók használatakor tartsa be a használati utasításokat, hogy a LED-fény ne világítson közvetlenül a szemébe.

Mi a teendő, ha a fények nem világítanak?

A galvanizáló áramkör bezárásához és a terápiás fény bekapcsolásához, valamint a G-Blue és a G-Red funkció használatakor az oldalsó elektródákat (fémlapokat) érinteni kell.

Használhatom a készüléket más személyen is?

Ha a G-Blue vagy a G-Red funkciót egy másik személynél alkalmazza, akkor a galvanikus áramkört az adott személynek is meg kell érintenie az áramkör bezárásához. A Peeling funkciónál ez nem szükséges.

Szükséges speciális kozmetikai szereket használni?

A Peeler Reclar készülék bármely bőrápoló kozmetikai szerrel használható.

Az egyes funkciók korlátozások nélkül használhatóak?

Javasoljuk, hogy ne lépje túl az egyes funkciók előre beállított használati idejét.

Hogyan tölthetem fel a peeler készülék akkumulátorát?

Használja a mellékelt kábelt bármilyen USB-s tápforrással. Óvatosan csatlakoztassa a töltőkábelt. Javasoljuk, hogy a készüléket mindig teljesen töltsse fel.

Honnan tudom, hogy a készülék akkumulátora lemerült?

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED-kijelző 5 alkalommal kigyullad, és a készülék kikapcsol. Ennek megelőzése céljából javasoljuk, hogy körülbelül 30 perc használat után töltsse fel a készüléket.

Mikor van a készülék teljesen feltöltve?

A töltést piros fény jelzi. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, kigyullad a kék jelzőfény.

Használhatom a tisztító készüléket töltés közben?

Töltés közben a készülék nem működik.

A készülék akkumulátora nem töltődik, mi a teendő?

? Ha a készülék akkumulátora nem töltődik, ne próbálja meg erőltetni a töltőkábel benyomását a készülékbe. Lehet, hogy a kábel sérült. Ebben az esetben használjon másik, kompatibilis töltőkábelt.



reclar.com/instructions



reclar.com