


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Aqua peeling-ul cu ultrasunete
îndepărtează eficient sebumul,
celulele îmbătrânite și curăță în
profundime porii înfundați.
Frecvența de 28–30 kHz
garantează un efect maxim
de curățare, fiind în același
timp prietenoasă cu pielea.



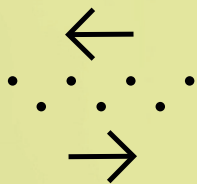

Ritual de curățare


Rezultat: un ten curat, fără celule îmbătrânite și impurități, pregătit să absoarbă substanțele active ale produselor cosmetice preferate.

Aveți nevoie de: un loc liniștit cu o oglindă, ten demachiat, Ritual Peeler Reclar, 5 minute.

Procedeu: Porniți funcția Peeling și treceți cu peeler-ul de la tâmpile în jos către nas și în sus, spre frunte; apoi dinspre gură către urechi și de la vârful nasului în sus. Umeziți în mod continuu fața cu un tampon umed.

Vă recomandăm un ritual de curățare de 1-2 ori pe săptămână, în funcție de tipul de ten.

Ritual terapeutic

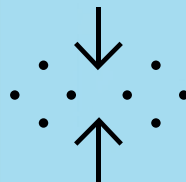

Rezultat: piele vindecată și calmată, îndepărtarea cicatricilor și petelor, ca un bonus la eficientizarea efectelor cosmeticelor.

Aveți nevoie de: crema, serul sau masca preferată, Ritual Peeler Reclar, câteva minute.

Procedeu: Aplicați pe piele crema, masca sau serul de ten preferat și activați funcția G-Blue. Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În timp ce faceți acest lucru, atingeți benzile laterale astfel încât lumina albastră terapeutică să fie aprinsă.

Vă recomandăm să efectuați acest ritual terapeutic în mod regulat, fiind suficiente doar câteva minute pe zi.



A young man with long, dark, wavy hair is shown from the chest up, holding a white and gold facial device against his cheek. The device emits a soft blue light onto his skin. The background is a solid, light blue color.

Lumina albastră vindecă acnea și
sterilizează țesutul pentru a preveni o
eventuală inflamație ulterioară.
În același timp, ajută la vindecarea
rănilor și a cicatricilor mici.
Galvanizarea amplifică efectul
produselor cosmetice de
îngrijire și ajută la
menținerea elasticității
pielei.


Ritual de întinerire

Rezultatul: ten neted și strălucitor, pori contractați, activarea producției de colagen.

Aveți nevoie de: crema, serul sau masca preferată, Ritual Peeler Reclar, câteva minute.


Procedeu: Aplicați crema, masca sau serul de ten preferat și activați funcția G-Blue. Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În timpul terapiei țineți peeler-ul în lateral, astfel încât lumina roșie de întinerire să fie aprinsă.

Vă recomandăm să efectuați acest ritual de întinerire în mod regulat, fiind suficiente doar câteva minute pe zi.

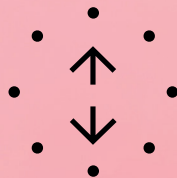

Lumina roșie activează colagenul, reduce ridurile și petele pigmentare, contractă porii. Galvanizarea amplifică efectul produselor cosmetice de îngrijire și ajută la menținerea elasticității pielii.



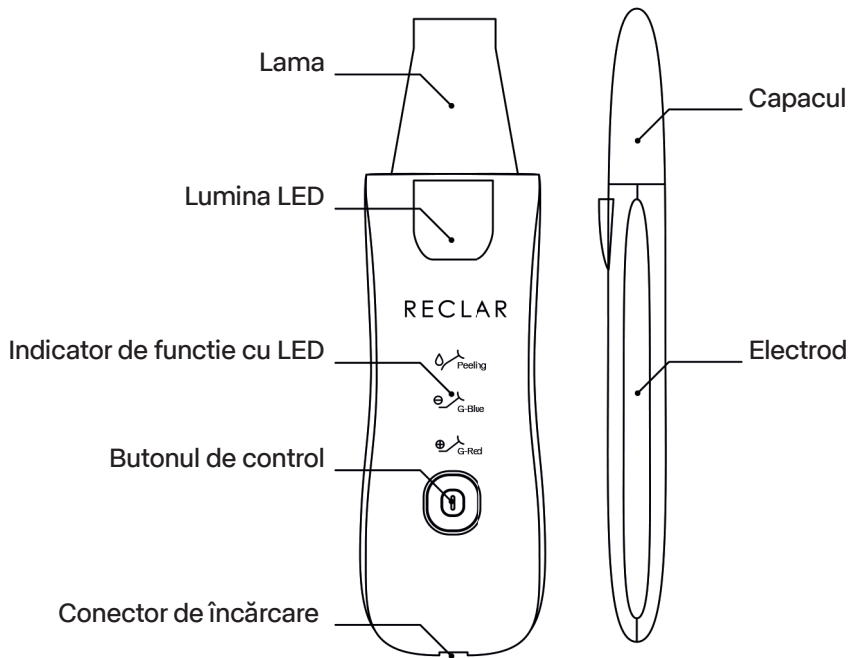


Pornire rapidă

1) Încărcați complet aparatul cu ajutorul cablului inclus.


Nu introduceți forțat cablul în aparat. Lumina roșie indică încărcarea. Lumina albastră indică încărcarea completă.

2) Scoateți capacul lamei.


Întoarceți capacul lamei spre dvs., așa cum se arată în ilustrație.

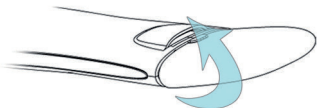


3) Porniți aparatul apăsând lung butonul de control.

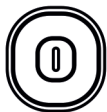

4) Selectați funcția dorită:

 Peeling – apăsați o dată butonul de control

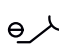 G-Blue – apăsați de 2 ori scurt butonul de control

 G-Red – apăsați de 3 ori scurt butonul de control

Notă: Pentru a activa terapia cu lumină, este necesar să atingeți electrozii - benzi metalice laterale - în timpul aplicării.

Dacă aplicați G-Blue sau G-Red unei alte persoane, trebuie să închideți circuitul atingând acea persoană.

5) Opriți aparatul apăsând lung butonul de control.

După fiecare utilizare curățați atent lama cu o cârpă din bumbac sau dezinfecțați-o.

FUNCȚIE DE PEELING




Curățarea pielii cu ultrasunete

Se poate efectua de 1-2 ori pe săptămână, în funcție de tipul de ten. Durata curățării pielii este setată la max. 5 minute, după care funcția se oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp pentru o singură utilizare.

Pasul 1: Demachiați-vă și spălați pielea. Aceasta ar trebui să rămână ușor umedă în timpul peeling-ului, așa că vă recomandăm să vă pregătiți, de exemplu, un tampon de vată înmuiat în apă, cu care să puteți hidrata pielea în mod regulat.

Pasul 2: Apăsăți lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a activa funcția Peeling, apăsați o dată scurt butonul până în poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați o dată scurt.

Pasul 3: Lăsați peeler-ul întors cu spatele spre dvs., așezați ușor lama pe pielea umedă. Treceți cu peeler-ul de la tâmpile în jos, către nas și în sus, spre frunte; apoi dinspre gură către urechi și de la vârful nasului în sus. Umeziți continuu fața. Peeling-ul poate usca pielea, așa că după curățare vă recomandăm să aplicați produsele cosmetice hidratante preferate.

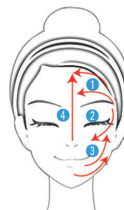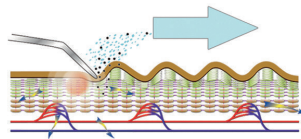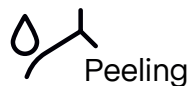

FUNCȚIA G-BLUE




Galvanizare cu terapie cu lumină albastră

Se poate aplica zilnic. Durata unei terapii este setată la max. 5 minute, după care funcția se oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp.

Pasul 1: Aplicați produsele cosmetice de îngrijire preferate (cremă, mască sau ser) pe pielea curățată. Pielea trebuie să fie suficient de hidratată cu produsul ales.

Pasul 2: Apăsăți lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a activa funcția G-Blue, apăsați de 2 ori scurt butonul până în poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați de 2 ori scurt.

Pasul 3: Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În timpul terapiei țineți peeler-ul în lateral, astfel încât lumina albastră vindecătoare să fie aprinsă.

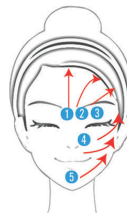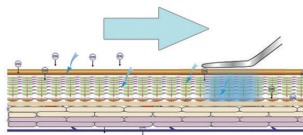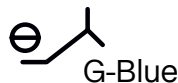


FUNCȚIA G-RED


Galvanizare cu terapie cu lumină roșie

Se poate aplica zilnic. Durata unei terapii este setată la max. 5 minute, după care funcția se oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp.


Pasul 1: Aplicați produsele cosmetice de îngrijire preferate (cremă, mască sau ser) pe pielea curățată. Pielea trebuie să fie suficient de hidratată cu produsul ales.

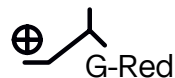

Pasul 2: Apăsăți lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a activa funcția G-Red, apăsați de 3 ori scurt butonul până în poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați de 3 ori scurt.

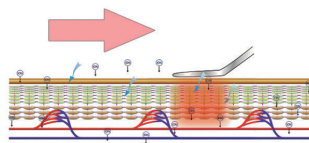

Pasul 3: Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În timpul terapiei țineți peeler-ul în lateral, astfel încât lumina roșie de întinerire să fie aprinsă.

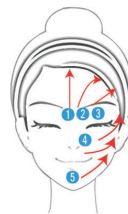

Întrebări frecvente

Pot să folosesc peeler-ul în duș?

Produsul nu este impermeabil! Se poate deteriora atunci când intră în contact cu apa.

Cum se curăță lama?

Vă recomandăm să curățați lama cu o lavetă Reclar sau cu un material fin din bumbac.

Cu ce se poate dezinfecta?

Puteți dezinfecta cu un produs de curățare pe bază de alcool.

Este în regulă ca lama să se miște?

Lama are joc necesar pentru ca peeler-ul să funcționeze corect în timpul vibrațiilor, așa că nu trageți de ea cu forță, ci doar ștergeți-o ușor.

Unde se poate păstra peeler-ul după utilizare?

Păstrați peeler-ul într-un loc uscat. Nu vă recomandăm să-l lăsați în baie sau în altă cameră umedă.

Pot folosi peeler-ul în timpul sarcinii?

Funcția Peeling, da. Utilizarea funcțiilor G-Blue și G-Red nu este recomandată în timpul sarcinii.

Lumina este dăunătoare ochilor?

În timpul utilizării funcțiilor G-Blue și G-Red, urmați instrucțiunile pentru a preveni ca lumina LED să lumineze direct în ochi.

Ce se poate face când luminile se aprind?

Pentru a închide circuitul de galvanizare și pentru a se aprinde lumina terapeutică, este necesar să țineți electrozii laterali (benzile metalice) în timp ce utilizați G-Blue și G-Red.

Pot folosi un peeler-ul pe o altă persoană?

Dacă aplicați funcția G-Blue sau G-Red unei alte persoane, trebuie să închideți circuitul atingând acea persoană. Acest lucru nu este necesar pentru funcția Peeling.

Este necesar să se folosească produse cosmetice speciale?

Peeler Reclar poate fi folosit cu orice produs cosmetic de îngrijire.

Pot folosi funcții individuale fără restricții de timp?

Vă recomandăm să nu depășiți timpul de utilizare prestabilit pentru fiecare funcție.

Cum se încarcă peeler-ul?

Utilizați cablul inclus cu orice sursă USB. Introduceți ușor cablul de încărcare. Vă recomandăm să încărcați întotdeauna complet aparatul.

Cum îmi dau seama că peeler-ul este descărcat?

Când bateria este slabă, indicatorul LED se aprinde de 5 ori și dispozitivul se oprește. Vă recomandăm încărcarea preventivă după aproximativ 30 de minute de utilizare.

Când este complet încărcat aparatul?

Încărcarea este indicată de o lumină roșie. Când este complet încărcat, se aprinde indicatorul luminos albastru.

Pot folosi peeler-ul în timpul încărcării?

Aparatul nu funcționează în timpul încărcării.

Aparatul nu se încarcă, ce trebuie făcut?

Dacă aparatul nu se încarcă, nu încercați să introduceți forțat cablul de încărcare în aparat. Poate fi vorba despre un cablul deteriorat. În acest caz, utilizați un alt cablu de încărcare compatibil.



reclar.com/instructions



reclar.com

